

BeneFusion nSP/nVP/nDS

Sistema de infusão

Toque inteligente, medicação segura





Tela sensível ao toque de 7"
oferecendo uma nova experiência para o usuário



Design da janela transparente
fácil de limpar e observar o status da seringa



Design intuitivo da IU
80% da operação pode ser feita na interface principal.



Material excelente
admite até 49 desinfetantes

Toque a flexibilidade

Experiência de toque extraordinária

O BeneFusion série n apresenta uma tela sensível ao toque colorida em tamanho normal que vem com uma interface de usuário intuitiva a fim de proporcionar uma experiência interativa extraordinária jamais vista antes.

- A tela sensível ao toque capacitiva HD de 7 polegadas torna a interação tão agradável quanto usar dispositivos inteligentes em sua vida diária.
- A interface de usuário intuitiva facilita as operações, apresentando parâmetros essenciais com um layout elegante.



Tudo em um

O BeneFusion nSP e o nVP são versáteis o suficiente para integrar todas as funções a fim de satisfazer uma variedade de finalidades clínicas.



Solução de ancoragem flexível

O BeneFusion nDS é flexível o suficiente para fornecer uma solução abrangente a uma variedade de cenários de infusão.

- O design modular sem ferramentas permite uma expansão mais fácil dos compartimentos de 2 a 24 bombas
- A estação de transferência BeneFusion tDS permite transferências simples e eficientes de pacientes



Plug-and-play com uma mão

Carregamento fácil e suave das bombas nos compartimentos da base de encaixe.



Revezamento automático multicanal


O revezamento circular e personalizado juntos garantem um processo estável de administração de medicamentos.

Dedicado à segurança

Tecnologias inovadoras garantem medicação segura


SmartRapid

O SmartRapid garante uma infusão adequada, reduzindo significativamente o tempo de inicialização, desde a ligação da bomba até a administração da primeira gota de medicamento.

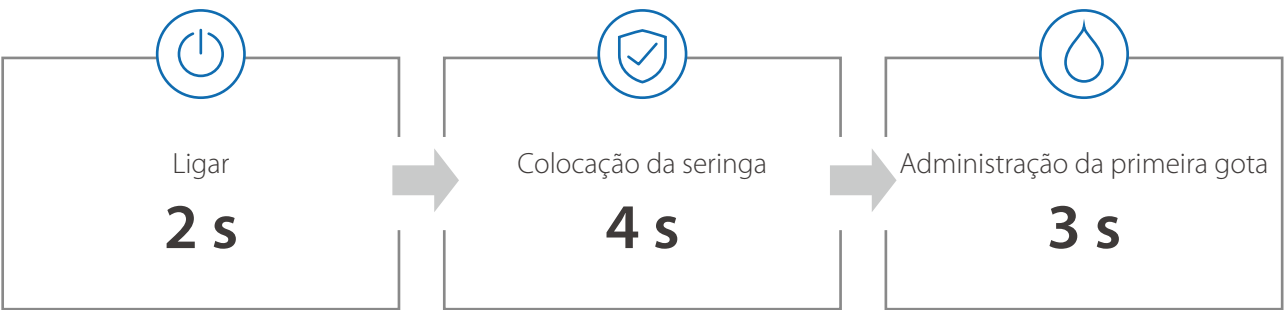

Desempenho preciso e consistente

- Precisão impressionante: $nSP \leq \pm 1,8\%$; $nVP \leq \pm 5\%$
- O fluxo se inicia com uma precisão de 0,01 ml/h
- Seringas compatíveis pequenas de 1 ml

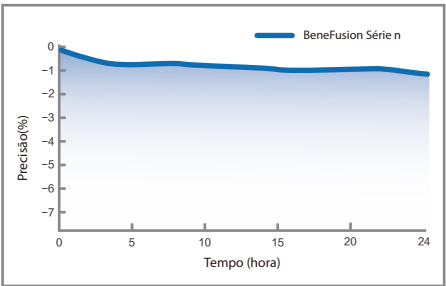

SmartAIR

O SmartAIR aprimora a segurança geral, monitorando os problemas de ar nos tubos ao administrar a infusão a um paciente.

SmartAIR Dual

O design de sensor duplo da detecção de bolhas de ar garante um alarme preciso de ar nos tubos.


SmartAIR Empty

O mecanismo inovador de detecção de recipientes vazios informa de forma oportuna a conclusão da infusão sem nenhum acessório.



Sistema de pressão dinâmica (DPS)

Indicador em forma de velocímetro com pressão numérica para monitorar com apenas um olhar a tendência da pressão em linha.

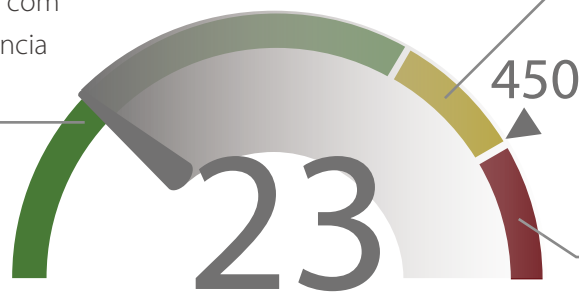


Alerta com uma mensagem visual sobre a possível oclusão antes de interromper a infusão.


O mecanismo de tentativa automática permite retomar a infusão o antes possível para garantir a infusão contínua.

Gerenciamento guiado de alarmes


O gerenciamento de alarmes altamente visível permite que os usuários localizem e resolvam rapidamente o problema.

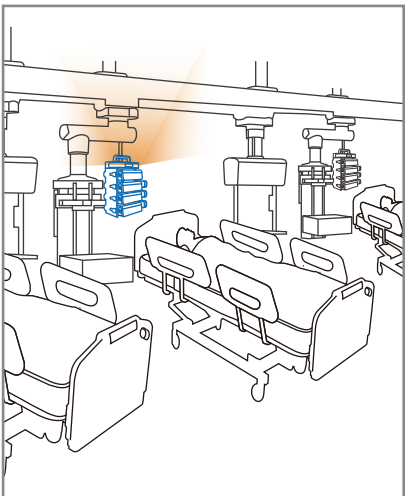

Localização rápida do alarme de cabeceira
com iluminação do alarme visível em 270° à distancia no BeneFusion nDS.

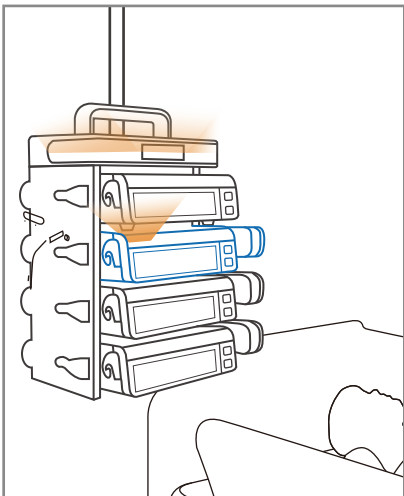

Localização rápida do alarme de cabeceira
com um alarme sonoro e visual no BeneFusion nSP/nVP ao lado da cama.

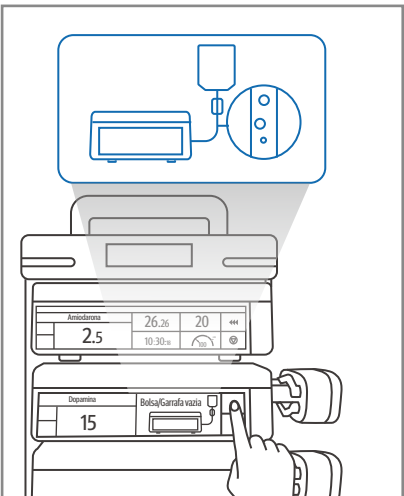

Localização rápida do problema
com uma animação instrutiva exibida na bomba para ajudar na resolução de problemas



Gerenciamento de medicamentos com segurança durante toda a infusão

Sistema de codificação por cores

- O código de cores dos nomes dos medicamentos ajuda os usuários a selecionar e verificar facilmente o medicamento correto.
- O software SafeDose™ Info permite programar parâmetros de infusão automaticamente para aumentar a eficiência.




InfusionView

- As tendências dos sinais vitais e as estatísticas de alarme estão alinhadas com as informações da infusão a fim de fornecer uma compreensão abrangente da condição do paciente.
- Orienta os usuários com a dosagem apropriada de medicamento ao ajustar o tratamento de infusão.
- Auxilia os usuários a otimizarem com prescrições mais precisas, revisando as últimas 24 horas do tratamento anterior.



SafeDose™ DERS

O SafeDose™ DERS ajuda a reduzir erros com fármacos, impedindo que os usuários excedam os limites rígidos predefinidos e exigindo confirmação para substituir os limites tolerados.

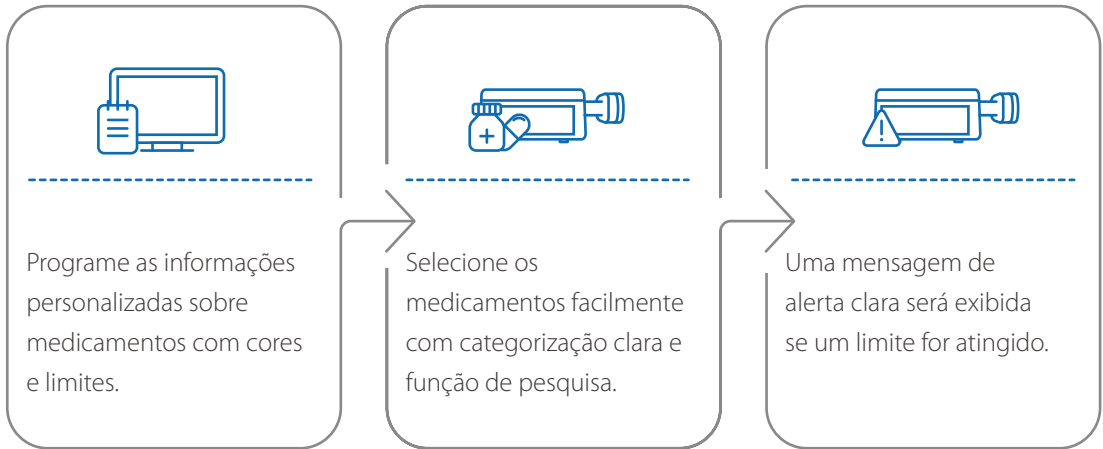

Fácil manutenção

- A uniformidade com a qual está fabricado determina a base para uma fácil manutenção
- Economiza bastante o tempo dos engenheiros biomédicos com consumíveis pré-configurados
- Simplifica a calibração conjunto de dispositivos, carregando e distribuindo dados facilmente



Sinergia conectada

Gerenciamento centralizado dos dados

- Capaz de monitorar até 72 nDS simultaneamente
- Capaz de obter informações sobre infusão e alarme em qualquer lugar e a qualquer momento
- Acesso ao HIS/CIS/EMR através do protocolo HL7



Monitoramento central integrado

O BeneVision CMS oferece monitoramento completo de todos os detalhes dos sinais vitais e do tratamento de infusão dos pacientes, fornecendo informações abrangentes para os clínicos a fim de melhorar a qualidade do atendimento ao paciente.



Gerenciamento de medicamentos em circuito fechado

Auxilia a equipe clínica a reduzir erros de medicação com o scanner de código de barras, alinhando a prescrição automaticamente, bem como aumentando a eficiência do fluxo de trabalho.

